


**sulpack**<sup>®</sup>  
máquinas para embalagens

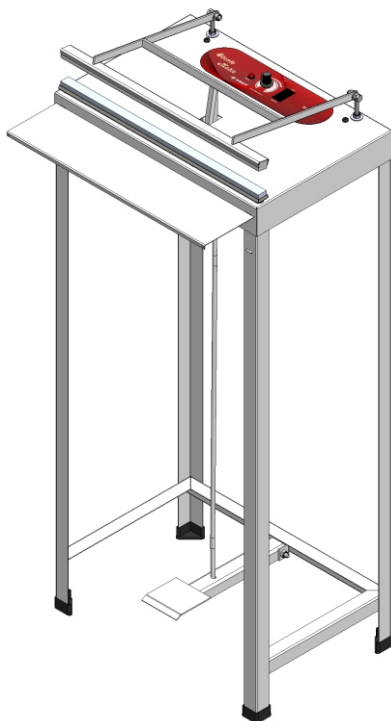

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Seladoras

MODELO

SCP 400 220V

## INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir este produto da marca Sulpack.

A **Sulpack Ind. de Máq. para Embalagens Ltda.** garante este produto pelo período de 06 meses já acrescidos da Garantia Legal contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Este produto foi produzido dentro dos padrões de segurança estabelecidos por normas internacionais e proporcionam ao usuário a certeza de que o mesmo estará protegido contra possíveis problemas decorrentes da falta de segurança na parte elétrica, assim como estará assegurado de ter adquirido um produto de qualidade.

**Consumidor:** Leia atentamente este Manual de Instruções para poder utilizar o seu produto da melhor maneira, obter o máximo rendimento proporcionando maior durabilidade ao mesmo.

Atenciosamente



### ATENÇÃO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

## INSTALAÇÃO

- \* Primeiramente identifique qual o modelo da sua Seladora;
- \* Leia atentamente todo o manual do usuário antes de ligar a mesma.

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Antes de ligar o seu equipamento, verifique se a tensão correta da rede (220V) é a mesma do equipamento que você adquiriu.



- Faça o devido aterramento do seu equipamento.



Seu equipamento foi produzido com cabo de alimentação que atende NBR 14.136, padrão 03 pinos redondos 2P + T. O pino central é o terra.

### ATENÇÃO

Caso o cabo de alimentação estiver danificado ou rompido, deverá ser substituído somente por agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## TABELA DE TENSÕES

NOMINAL	MÍNIMO	MÁXIMO
220V	200V	242V


- \* A tensão fora dos limites estabelecidos pode causar danos irreversíveis ao seu equipamento e causará perda de garantia do mesmo;
- \* A tomada de energia deve ser exclusiva para este produto;
- \* Não utilize adaptadores tipo “T(s)” para conexão do aparelho à rede elétrica. Use somente tomadas com aterramento.

## UTILIZAÇÃO / FINALIDADE

Equipamento indicado especialmente para selagem de embalagens de papel grau cirúrgico, porém também é possível a selagem de polipropileno e aluminizados, desde que observados os devidos níveis de tempo e temperatura específicos para cada material.

## ESPECIFICAÇÕES:

Especificações	SCP 400
Área de solda (mm)	400x13
Tensão (V)	220
Pot. Instalada (W)	300
Material a selar	Papel grau cirúrgico, Polipropileno e Alumínio
Resistência (tipo)	Barramento de alumínio
Aquecimento (tipo)	Barra aquecida
Características resistência	300W/220V
Temperatura de operação (°C)	100 à 250
Peso máximo de trabalho na mesa (kg)	1

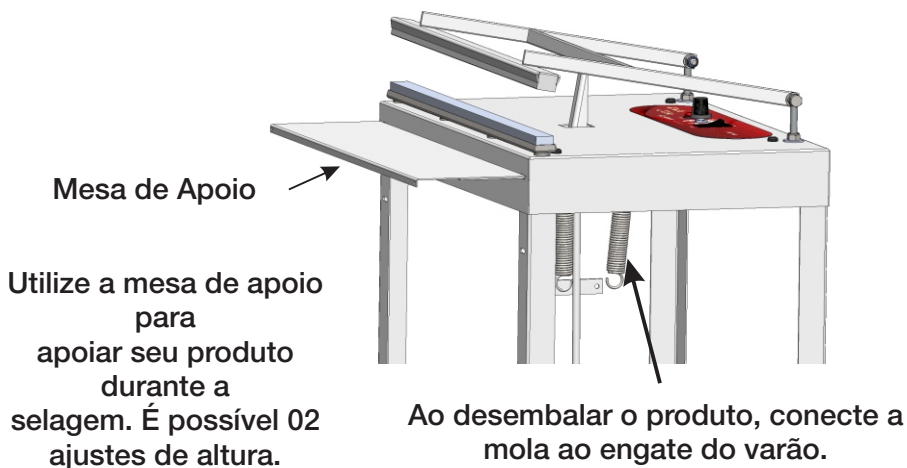

## **MODO DE USAR**

### **SCP 400**

- Regule a temperatura desejada:
  - nível 8 para papel grau cirúrgico;
  - nível 7 para aluminizado;
  - nível 4 para PP.
  
- Os níveis de operação sofrem variações dependendo da espessura do plástico utilizado;
  
- Ligue a máquina e aguarde o pré-aquecimento de 15 minutos;
  
- É importante observar que quando se busca o ajuste da temperatura deve-se aguardar por alguns minutos, ou seja, ao trocar o nível da temperatura aguarde em torno de 5 minutos até a temperatura equalizar em todo o barramento;
  
- Coloque a embalagem com o plástico voltado para cima na área de solda e pressione o pedal. Mantenha pressionado por um tempo mínimo:
  - PP (Polipropileno) - Aproximadamente 03 segundos;
  - Papel Grau cirúrgico e AL (Aluminizado) - Aproximadamente 05 segundos.

**Atenção:** O tempo de solda para soltar o pedal deve ser determinado mentalmente.

## **LIMPEZA DOS BARRAMENTOS DE SOLDA**

- Para limpar o equipamento sempre desligue e retire da tomada;
  
- Nunca limpar com a máquina ainda quente;
  
- Nunca limpe o barramento de solda com produtos abrasivos ou ácidos.

## TABELA DE PROBLEMAS E PROCEDIMENTOS

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA PROVÁVEL</b>	<b>SOLUÇÃO</b>
<b>EQUIPAMENTO NÃO LIGA</b>	1) Falta de energia na rede elétrica; 2) Tensão da rede elétrica; 3) Plugue fora da tomada; 4) Condições da tomada.	1) Verifique disjuntor da instalação ou aguarde o retorno de energia; 2) Verifique se a tensão está correta; 3) Conecte o plugue na tomada.
<b>NÃO SELA. MÁQUINA AQUECE MUITO OU AQUECE POUCO.</b>	1) Rede elétrica não compatível; 2) Temperatura programada insuficiente; 3) Tempo de pré-aquecimento insuficiente; 4) Plástico diferente.	1) Verifique a tensão da rede elétrica; 2) Ajuste a temperatura corretamente; 3) Ajuste o tempo de pré-aquecimento corretamente. 4) Observar se plástico não mudou a espessura ou o material.
<b>SOLDA QUEIMANDO</b>	1) Excesso de temperatura; 2) Muito tempo a máquina ligada sem operar.	1) Ajustar a temperatura de solda; 2) Operar o equipamento por alguns ciclos até equilibrar as temperaturas das barras.

## **TERMO DE GARANTIA**

Garantimos que este produto está assegurado contra defeitos de fabricação pelo período de 06 (seis) meses já acrescidos da Garantia Legal, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro consumidor conforme nota fiscal.

A Sulpack Ind. de Máq. para Embalagens Ltda., tem pareceres exclusivos e não autoriza outras pessoas a julgar defeitos ocorridos no período de garantia, restringindo sua responsabilidade à substituição de peças com defeito, desde que essas peças sejam previamente identificadas por técnico credenciado ou pela própria fábrica, as quais deverão ser enviadas a fábrica para averiguação do possível defeito. Após a avaliação técnica serão remetidas ao cliente, sem ônus se comprovado defeito de fabricação.

Anula-se a garantia para produtos que tenham sido eventualmente reparados, modificados ou desmontados, bem como para aqueles que tenham sua utilização fora das especificações e orientações da fábrica.

A garantia é balcão, ou seja, a(s) peça(s) ou equipamento(s) com defeito deve(m) ser encaminhado(s) à fábrica ou Assistência Técnica mais próxima para análise.

No período de garantia, todas as peças substituídas e os serviços de execução serão gratuitos, nas condições deste termo. "As peças substituídas em garantia pertencem à Sulpack, e se solicitado deverão ser devolvidas à fábrica".

### **EXCLUEM-SE DA GARANTIA:**

Utilização inadequada;

Efeitos de corrosão, quedas, fogo, instalações elétricas deficientes, acionamento com voltagem invertida do produto e oscilações de energia;

Desgaste natural de borrachas e silicões, fios de resistências, fios de corte e fitas protetoras;

Qualquer dano em componentes como, por exemplo, placas eletrônicas, fiação que tenham sido causados por insetos ( baratas ) ou por roedores ( ratos ), onde estes roem fios e urinam sobre os componentes, causando com isso os chamados curtos circuitos;

As despesas de transporte (embalagem e frete), de produtos que devem retornar à fábrica, correm por conta e risco do cliente, salvo entendimentos entre a fábrica / revendedor / usuário.

### **A GARANTIA FICA AUTOMATICAMENTE INVALIDADA:**

Pelo decurso de prazo;

Inobservância de qualquer uma das recomendações constantes deste termo de garantia e manual de instruções;

Quando não for enviada à fábrica a 2ª via da nota fiscal ou sua cópia autenticada;

Para qualquer demanda judicial fica eleito o foro da comarca de Caxias do Sul - RS, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

**CASO FOR NECESSÁRIO ENTRAR EM CONTATO COM O FABRICANTE, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES E TENHA EM MÃOS A NOTA FISCAL DE COMPRA.**

Sulpack Ind. de Máq. para Embalagens Ltda  
Rua Vereador Otto Scheifler, 899 Desvio Rizzo – (54) 3223-9351  
CEP 95110-770 – Caxias do Sul/RS – Brasil  
CNPJ 00.319.979/0001-65



Sulpack Ind. de Máq. para Embalagens Ltda.  
Rua Vereador Otto Scheifler, 899 Desvio Rizzo - Fone: (54) 3223-9351  
CEP 95110-770 - Caxias do Sul - RS - Brasil  
CNPJ 00.319.979/0001-65  
[www.sulpack.com.br](http://www.sulpack.com.br) - e-mail: [sulpack@sulpack.com.br](mailto:sulpack@sulpack.com.br)